

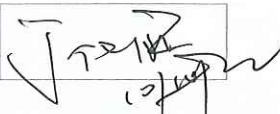
檢測儀器校驗報告  
Calibration Report

校驗報告編號：CLR221024-001  
Report No. :

儀器名稱 Instrument	9133平面黑體	儀器編號 Instrument No.	KSRII0001-04	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0029	校驗日期 Calibration Date	10/24/2022	
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	22.9 °C	53 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
-15	degC	-14.8193	-15.0000	-0.18070	± 0.3	Accepted	
0	degC	0.1723	0.0000	-0.17230	± 0.3	Accepted	
50	degC	50.1193	50.0000	-0.11930	± 0.3	Accepted	
100	degC	99.7708	100.0000	0.22920	± 0.3	Accepted	
140	degC	139.7214	140.0000	0.27860	± 0.3	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 10/24/2022	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-------------------	----------------	---

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------