

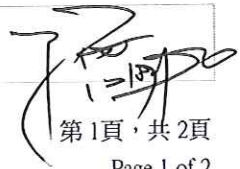
檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：CLR201007-001
Report No. :

儀器名稱 Instrument	9133平面黑體	儀器編號 Instrument No.	KSRII0001-08
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0029	校驗日期 Calibration Date	10-07-2020
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	22.8 °C 56 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
0	degC	0.0987	0.0000	-0.09870	± 0.3	Accepted	
25	degC	25.1023	25.0000	-0.10230	± 0.3	Accepted	
40	degC	40.1289	40.0000	-0.12890	± 0.3	Accepted	
60	degC	60.1809	60.0000	-0.18090	± 0.3	Accepted	
65	degC	65.1914	65.0000	-0.19140	± 0.3	Accepted	
120	degC	120.2069	120.0000	-0.20690	± 0.3	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 10/07/2020	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-------------------	----------------	---

第 1 頁，共 2 頁
Page 1 of 2

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 5年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [003] 04/10/2007
------------------	---------	------------------	--------------------------